

Miele

Met gemak hygiënisch schoon
De Miele-bedpanspoeler/desinfector

Miele Professional. Immer besser.



Kwaliteit van Miele Professional

Met minder hoeft u geen genoegen te nemen



Miele Professional staat sinds jaar en dag voor de hoogste betrouwbaarheid bij alle toepassingen waarbij hygiëne van het hoogste belang is. Onze reinigings- en desinfectieautomaten zijn populaire hulpmiddelen bij de instrumentenbehandeling, terwijl onze wasautomaten en afwasautomaten met verswatersysteem zich dagelijks bewijzen bij de veeleisende hygiënisch reinigingswerkzaamheden in de zorgsector. De Miele-bedpanspoelers/desinfectors vormen een uitstekende aanvulling op het assortiment en verlichten de dagelijkse werkdruk.

Met gemak hygiënisch schoon.

Kwaliteit

De legendarische Miele-kwaliteit dankt haar uitstekende reputatie aan het duurzame ontwerp met hoogwaardige materialen. Zo worden de bedpanspoelers/desinfectors van Miele standaard gemaakt van roestvrij staal en speciaal geselecteerde componenten. Maar bij Miele Professional omvat kwaliteit nog meer aspecten. Bijvoorbeeld op de praktisch gerichte details voor een snelle, hygiënische en veilige belading en ergonomische bedieningselementen. Maar ook de probleemloze plaatsing, zelfs in ruimten met zeer weinig plaats.

Efficiëntie

Met de bedpanspoelers/desinfectors van Miele Professional kiest u voor een uitermate duurzame en economische oplossing. Het sterke Multijet sproeiersysteem zorgt voor een grondige reiniging van het spoelgoed bij een minimaal verbruik van water, energie en reinigingsmiddelen. Ook maakt de robuuste en onderhoudsarme constructie van de bedpanspoeler/desinfector een rationele investering die jaar na jaar voor een uitstekend rendement zorgt.

Vermogen

Miele-bedpanspoelers/desinfectors verwijderen op betrouwbare wijze alle vervuiling van bedpannen en/of urineflessen, zowel van roestvrij staal als van kunststof. Deze grondigheid wordt mogelijk gemaakt door een innovatieve plaatsing van roterende sproeiers en speciaal afgestemde spoelprogramma's.



Met Miele Professional kiest u voor uitstekende prestaties en kwaliteit. Hoogwaardige apparaten die elke dag weer op betrouwbare wijze voldoen aan de verwachtingen zijn de reden voor het enorme vertrouwen van professionele gebruikers: 97% van alle klanten zou opnieuw kiezen voor een Miele Professional-apparaat.*

Betrouwbaarheid

Al sinds vier generaties dragen wij als familiebedrijf een speciale verantwoording voor onze klanten, partners, medewerkers en producten.

- Productontwikkeling waarbij kwaliteit, een lange levensduur en duurzaamheid centraal staan
- Toonaangevende innovaties "Made in Germany"
- Productontwerpen die herhaaldelijk zijn onderscheiden op het gebied van ergonomie en functionaliteit
- Omvangrijke totaaloplossingen van één leverancier
- Lage bedrijfskosten tijdens de gehele levensduur
- Uitstekende service met korte lijnen naar servicetechnici.



*Volgens een enquête die is uitgevoerd door het onafhankelijke instituut "Mercuri International"

Bedpanspoelers/desinfectors van Miele Professional

Uiterste betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie



Waarborgen van hygiëne

Miele-bedpanspoelers/desinfectors zijn ontwikkeld om verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen, en beschermen op deze manier niet alleen patiënten of cliënten, maar ook het personeel. Zo voeren de machines, naast de reiniging, een thermische desinfectie uit die overeen komt met de actuele richtlijnen en aanbevelingen. Hierdoor worden de hoogste hygiënenormen gegarandeerd.

Bescherming en efficiëntie


Miele-bedpanspoelers/desinfectors zorgen op meerdere niveaus voor hygiëne-veiligheid. Het volledig gladde oppervlak van roestvrij staal met minimale groeven is bijzonder gemakkelijk te reinigen, en het ontwerp van de spoelruimte zonder lasnaden voorkomt het vastkleven van verontreinigingen. Afhankelijk van het model is volledige geautomatiseerde deurbediening (openen en sluiten) beschikbaar om extra hygiënebescherming te realiseren en contaminatie te voorkomen.

Meer bedieningsgemak dankzij praktische accessoires

U hebt de keuze uit verschillende beladingssystemen. Daardoor zijn deze spoelers geschikt voor een breed scala aan spoelgoed. De Bedpan-uitstortgootstenen met handmatige of automatische randspoeling vormen een perfecte aanvulling op het systeem.

Overzicht van alle productvoordelen

Miele-bedpanspoeler/desinfector serie PWD 854x

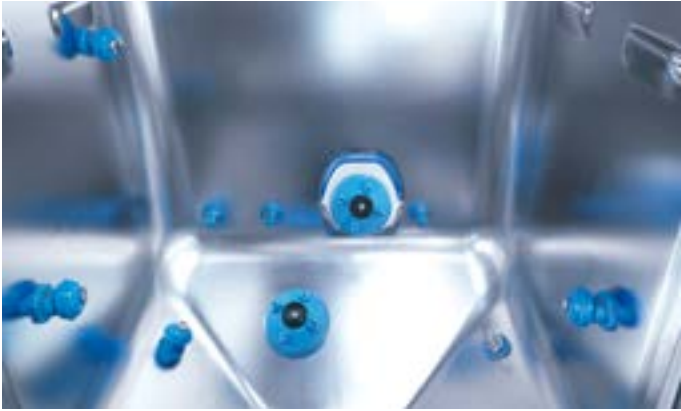

Geavanceerd reinigings- en desinfectiesysteem

- Spoelsysteem met Multijet rotatiesproeier (modelafhankelijk)
- Meerdere roterende en vaste sproeiers garanderen een verdeling van water en reinigingsmiddelen waarbij geen sproeischaduw kan ontstaan
- De volledige buiten- en binnenoppervlakken van het spoelgoed worden hygiënisch en met reproduceerbare effectiviteit gereinigd
- Spoelruimte en machineafdekking van roestvrij staal
- Spoelruimte zonder lasnaden en met afgeronde hoeken voorkomt ophoping van ontreinigingen en verspreiding van ziektekiemen
- Thermische desinfectie van de spoelruimte en het sproeiersysteem bij elk programma.



Intelligente besturing

- Permanente machinebewaking en aanduiding van de actuele status
- Individuele aanpassing van de spoelprogramma's op basis van de klantwens
- Drie spoelprogramma's voor verschillende soorten verontreinigingen
- Eenvoudige bediening via keuzetoetsen
- Het tekstdisplay toont alle relevante gegevens, bijvoorbeeld naam en status van het huidige programma, resterende programmaduur, bereikte A0-waarde en maximale spoeltemperatuur (modelafhankelijk).



Automatische deurfuncties

- Geautomatiseerde deurbediening beschikbaar voor alle modellen: voetschakelaar voor bediening zonder handcontact
- Besmet spoelgoed wordt op een ergonomische werkhoogte in de machine geladen (modelafhankelijk)
- Extra verhoging van bedieningsveiligheid en ergonomie
- Automatische vergrendeling van de spoelruimte bij de start van het programma.

Bedpanspoeler/desinfector PWD 8541

PWD 8541 MD, PWD 8541 AD



PWD 8541 MD

Onderbouwapparaat, met handmatig openen/sluiten van de deur.

PWD 8541 AD

Onderbouwapparaat, met automatisch openen/sluiten van de deur.

Productspecificaties

- h 850, b 600, d 600 mm
- Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 1 urinefles of 4 urineflessen*
- Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
- Desinfectieniveau op basis van behoefte - instelbare A0-waarde
- Eenvoudige opstelling in kleine ruimten - compacte buitenmaten
- Klantspecifieke programma-aanpassing - programmeerbare besturing.

* De capaciteit is afhankelijk van het soort spoelgoed en kan afwijken. Verschillende combinaties van urineflessen en bedpannen is mogelijk.

Beladingsvoorbeelden



Bedpanspoeler/desinfector PWD 8545

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD



PWD 8545 MD

Vrijstaand apparaat, met handmatig openen/sluiten van de deur.

PWD 8545 SAD

Vrijstaand apparaat met automatisch openen van de deur via een voetschakelaar en handmatig sluiten van de deur.

PWD 8545 AD LCD

Vrijstaand apparaat, met automatisch openen van de deur en LCD-display.

Productspecificaties

- h 1630, b 545, d 475 mm
- Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 1 urineflles of 3 urineflessen*
- Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
- Desinfectieniveau op basis van behoefte - instelbare A0-waarde
- Optimale vaatwasresultaten - Multijet rotatiesproeier
- Klantspecifieke programma-aanpassing - programmeerbare besturing.

* De capaciteit is afhankelijk van het soort spoelgoed en kan afwijken.
Verschillende combinaties van urineflessen en bedpannen is mogelijk.

Beladingsvoorbeelden



Bedpanspoeler/desinfector PWD 8549

PWD 8549 AD



Beladingsvoorbeeld

PWD 8549 AD

Vrijstaand apparaat, met volledig automatische glazen hefdeur.

Productspecificaties

- h 1750, b 600, d 610 mm
- Capaciteit/charge maximaal 1 bedpan en 2 urineflessen*
- Eenvoudige bediening - keuzetoetsen
- Desinfectieniveau op basis van behoefte - instelbare A0-waarde
- Optimale reinigings- en desinfectieresultaten - Multijet rotatiesproeier
- Klantspecifieke programma-aanpassing - programmeerbare besturing
- Ruimtebesparende oplossing dankzij verticale deurbeweging.

* De capaciteit is afhankelijk van het soort spoelgoed en kan afwijken. Verschillende combinaties van urineflessen en bedpannen is mogelijk.



Technische gegevens

Bedpanspoeler/desinfector, uitstortgootstenen



Bedpanspoeler/desinfector	PWD 8541 MD, 8541 AD	PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD
Urineflessen per charge max.	4	3
Bedpannen/urineflessen per charge	1/1	1/1
Programma's	3	3
Buitenmaten h/b/d [mm]	850/600/600	1630/545/475
Doseerpomp	•	•
Wateraansluitingen	KW / WW	KW / WW
Afvoer	Wandafvoer, ombouwbaar	Wandafvoer, ombouwbaar
Elektrische aansluiting	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz



Bedpanspoeler/desinfector	PWD 8549 AD
Urineflessen per charge	2
Bedpannen/urineflessen per charge max.	1/2
Programma's	3
Buitenmaten h/b/d [mm]	1750/610/600
Doseerpomp	•
Wateraansluitingen	KW / WW
Afvoer	Wandafvoer, ombouwbaar
Elektrische aansluiting	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz



Uitstortgootsteen	APWD 075	APWD 076	APWD 077	APWD 078
Wateraansluiting voor handmatige spoeling	•	–	•	–
Wateraansluiting voor automatische spoeling	–	•	–	•
Geschikt voor aansluiting op waterkraan*	–	–	•	•
Buitenmaten h/b/d [mm]	590/500/600	590/500/600	590/500/700	590/500/700

*De waterkraan wordt niet bijgeleverd.





Miele Nederland B.V.

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
The Netherlands

Tel. +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429

Verkoop & algemene vragen:
professional@miele.nl
Service & onderhoud:
serviceprofessional@miele.nl
Website: www.miele-professional.nl

Immer besser

Sinds 1899 gaat familiebedrijf Miele volgens een duidelijke filosofie te werk: Immer besser. Dit alomvattende streven vormt de basis voor de legendarische kwaliteit, duurzaamheid en innovatiekracht van een merk "Made in Germany". Een belofte die professionele gebruikers ervan verzekert dat ze het juiste product hebben gekozen.

Uitstekend

Compromisloze betrouwbaarheid ten aanzien van producten is voor veel gebruikers de reden om Miele regelmatig te kiezen als beste en meest betrouwbare merk. Prestigieuze onderscheidingen als de MX Award, de iF Design Award, reddot Design Awards en de Duitse prijs voor duurzaamheid tonen aan dat Miele ook op het gebied van design, kwaliteitsbeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen een bijzondere plaats inneemt.

Vaardig

Miele Professional ontwikkelt en produceert al decennia lang was- en droogautomaten, afwasautomaten, reinigings- en desinfectie-apparatuur en sterilisatoren die blijf geven van diepgaande kennis op productiegebied. Zorgvuldig afgestemde accessoires, uitgebreid advies en een Miele-klantenservice met uitermate korte lijnen zorgen ervoor dat u met Miele altijd optimaal presterende, zuinige apparatuur in huis haalt.

Miele Professional op internet

- Uitgebreide informatie over technische gegevens, beschikbare uitvoeringen en accessoires
- Te downloaden brochures voor alle productgroepen en toepassingsgebieden
- Duidelijke afbeeldingen, gebruiksaanwijzingen en productpresentaties via het YouTube-kanaal.