

Proceschemie

Voor het verwerken van dentaal-instrumenten
in een Miele-thermodesinfector



Proceschemie voor het verwerken van dentaal-instrumenten in een Miele-thermodesinfector

System4Dent

Miele biedt een compleet programma voor de grondige en gegarandeerde instrumentenverwerking in de tandartspraktijk. Naast de levering en plaatsing van thermodesinflectoren en sterilisatoren geeft Miele Professional deskundig advies betreffende routing en hygiëne. Daarnaast verzorgt Miele de inbedrijfsname gevolgd door een op maat gesneden gebruikerstraining. Voor het gegarandeerd vastleggen van de processen zijn er diverse procesregistratie mogelijkheden. Nieuw in het Miele-programma is de proceschemie ProCare Dent. Deze chemie zorgt voor een grondige reiniging en verbetert daardoor de levensduur van uw instrumenten. Tevens optimaliseert ProCare Dent de verwerking in de thermodesinfector.

Naast een reproduceerbaar gecontroleerd proces creëren we een situatie waarin het tandheelkundig team veilig kan werken. Dankzij het complete pakket aan apparatuur en toebehoren heeft u meer zekerheid.



Reinigen/desinfecteren

Steriliseren

Documenteren

Garanderen

ProCare Dent

De ProCare Dent-producten uit het Miele-assortiment zijn zodanig geselecteerd dat ze een optimaal reinigingsresultaat en hoge materiaalverdraagzaamheid garanderen. U bent daarom verzekerd van een maximale bescherming van uw dentale instrumentarium!

Extra zekerheid

Een kleurencodering zorgt ervoor dat de verschillende ProCare Dent-producten goed uit elkaar worden gehouden. Er is dus minder kans op het verwisselen van producten.



Advies voor de routinematige verwerking van instrumenten inclusief hand- en hoekstukken

Programma: Vario TD Reinigingsmiddel:
vloeibare reiniger: ProCare Dent 10 MA
Naspoelen: ProCare Dent 40


ProCare Dent

Product	Beschrijving	Toelichting	Verpakkingsgrootte
Reinigen			
ProCare Dent 10 MA	Vloeibare reiniger, mildalkalisch	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentbeschermend • Uitermate geschikt voor hand- en hoekstukken 	5 l canister
ProCare Dent 10 A	Vloeibare reiniger, alkalisch	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge reinigende werking • Niet geschikt voor hand- en hoekstukken 	5 l canister
ProCare Dent 11 A*	Poederreiniger, alkalisch	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge reinigende werking • Niet geschikt voor hand- en hoekstukken 	10 kg emmer
Neutraliseren			
ProCare Dent 30 C	Zuur vloeibaar neutralisatiemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Uitermate geschikt voor hand- en hoekstukken • Op basis van citroenzuur 	5 l canister 1 l fles (met vuldop voor G 7831)
ProCare Dent 30 P	Zuur vloeibaar neutralisatiemiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijdert verkleuring en in zuur oplosbare verontreinigingen • Niet geschikt voor hand- en hoekstukken • Op basis van fosforzuur 	5 l canister 1 l fles (met vuldop voor G 7831)
Naspoelen			
ProCare Dent 40	Vloeibaar naspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetert en verkort de droging 	1 l fles (met vuldop)
Regenereren			
ProCare Universal 61	Grofkorrelig zout voor het regenereren van de ingebouwde ontharder	<ul style="list-style-type: none"> • Verhindert kalkafzetting en beschermt de instrumenten 	6 kg verpakking

Programmaafloop Vario TD in de Miele-thermodesinfector

De inzet van ProCare Dent-producten tijdens de verschillende programmastappen is uitermate geschikt om thermostabiele instrumenten te verwerken, conform de richtlijn EN ISO 15883.

Bij gebruik van het mildalkalische product ProCare Dent 10 MA is het procedé uiterst beschermend en geschikt om hand- en hoekstukken te reinigen. De ProCare Dent-producten zijn optimaal op de programma's afgestemd. Met Miele Professional bent u verzekerd van kwaliteit en zekerheid.

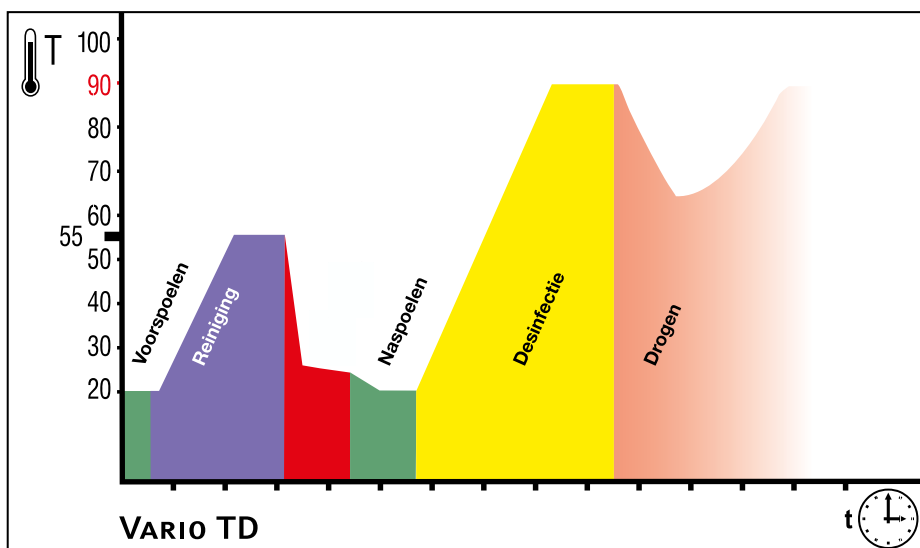

*Bij gebruik van het bovenrek O 190/2 en het bovenrek O 177 uit de vorige apparatenserie adviseren wij vloeibare zeep dosering

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
Internet: www.miele-professional.nl
E-mail: professional@miele.nl

Customer Service Miele Professional
Telefoon +31 (0)347 37 88 84

Miele Service Professional
Telefoon +31 (0)347 37 88 84

Miele Professional levert voor iedere branche systeemoplossingen



Wasserijapparatuur
Voor hotels, restaurants,
verpleegtehuizen, ziekenhuizen
en speciaaloplossingen



Professionele afwasautomaten
Voor hotels, restaurants,
verpleegtehuizen, kantines,
kinderdagverblijven en ziekenhuizen



Reinigings- en desinfectieautomaten
Voor privéklinieken, ziekenhuisafdelingen
en C.S.A.'s



Laboratorium reinigingsautomaten
Voor de farmaceutische-, chemische-
en levensmiddelenindustrie



Reinigingsautomaten
Voor industriële toepassingen zoals metaal,
kunststof, glasverwerking en elektronica



Service
Van advies op maat voorafgaand aan
de aankoop tot en met de uitgebreide
jarenlange service en dienstverlening